



MODEL #: **TP-5555**







Rx only


Triple Play VT[®] – Universal Shoulder Orthosis APPLICATION INSTRUCTIONS

DESCRIPTION: Shoulder orthosis, acromio/clavicular (canvas and webbing type,) prefabricated. The orthosis has two (2) chambers that fill from the distal upward toward the proximal end of the extremity.

1. Remove optional gel pack and place in freezer for a minimum of 1 hour.
NOTE: Each time the gel wrap thaws, refreeze for 1 hour.
2. Remove gel pack from freezer and re-attach to the inside of the wrap. Make sure to keep a protective thin cloth barrier between the skin and gel pack.
3. Thread arm through lower loop, and pull wrap up onto shoulder. Secure the middle strap around arm, and tighten lower and middle straps to achieve a snug fit. Take the longer strap and thread through the back clip so that it attaches across the back, under the unaffected arm and across the chest. Thread through clip and secure with tabs.
4. Once the wrap is on, secure the optional immobilizing sling to the front portion of the wrap. Place your wrist through the loop so that it comfortably approximates the arm at a 90° angle.
5. Refer to the QuickStart Guide or Instructions for Use included in the Triple Play VT packaging for instructions on operating the unit with orthotic wrap.
NOTE: Ensure that the valve switch on the wrap is in the ON position (vertical) before powering on TPVT unit.
6. Once the pressure is reached, you may choose to hold the pressure by closing the valve on the connector by turning the valve lever perpendicular (or 90°) to the hose line. If desired, the hose can be disconnected from the wrap by twisting the disconnect valve connector to the left.

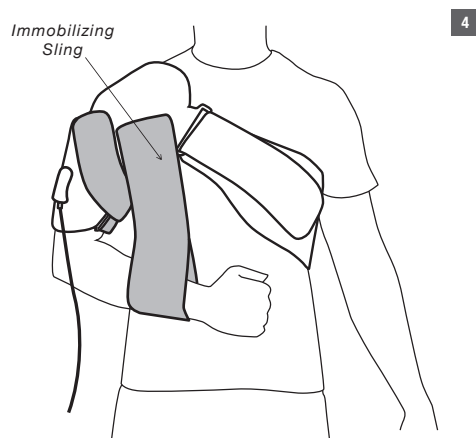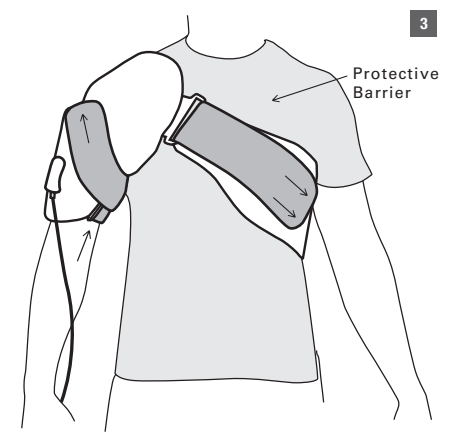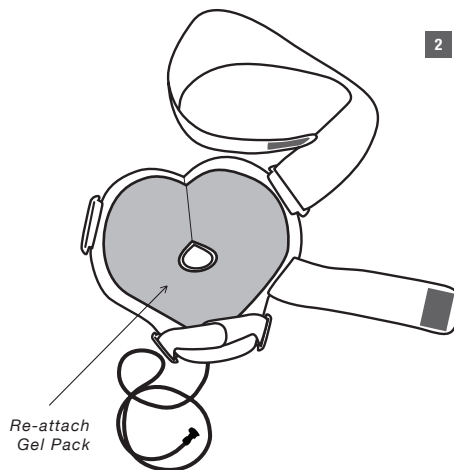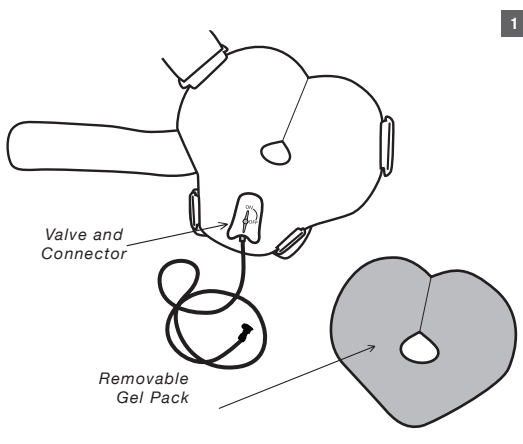


Valve Operation

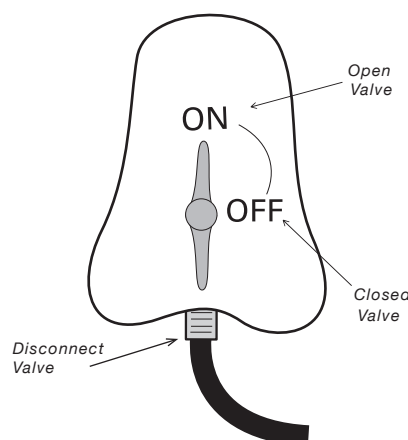

OPTIONAL HAND BULB

Your product is provided with an optional hand bulb which can be used to inflate/deflate the wrap in the absence of the Triple Play VT unit. If you desire, you may use scissors to cut the tubing just below the insertion into the wrap. Then place the barbed connector on the bulb into the tubing connected to the wrap.

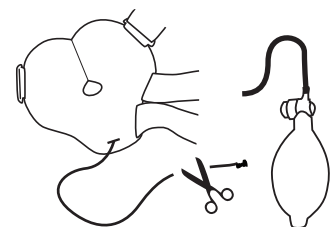

For questions about this product call: **800.994.0464**

www.CompressionSolutions.us







Triple Play VT® – Órtesis de Hombro Universal

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN


Descripción: Órtesis de hombro, acromio/clavicular (tipo de tela o cinta), prefabricada. La órtesis tiene dos (2) cámaras que se llenan desde el extremo distal subiendo hacia el extremo proximal de la extremidad

1. Retire la bolsa de gel opcional y colóquela en el congelador por un mínimo de 1 hora.
NOTA: cada vez que se derrita la venda de gel, vuelva a colocarla en congelador durante 1 hora.
2. Retire el gel del congelador, vuelva a adherir la bolsa de gel al interior de la venda.
3. Asegúrese de mantener una barrera protectora de tela fina entre la piel y la bolsa de gel. Coloque la venda en el hombro y sujete las dos tiras más cortas alrededor del brazo para que quede bien ceñida. Tome la tira más larga y pásela por el sujetador trasero de modo que se adhiera de un lado a otro de la espalda, debajo del brazo no afectado y de un lado al otro del pecho. Pásela por el sujetador y sujete con el velcro firmemente.
4. Una vez que la venda haya quedado bien sujeta, sujete con el velcro el cabestrillo inmovilizador opcional a la porción frontal de la venda. Pase su muñeca por la abertura de modo que se aproxime cómodamente al brazo a un ángulo de 90°.
5. Consulte la Guía de inicio rápido o las Instrucciones de uso incluidas en el paquete de la bomba para instrucciones sobre cómo operar la unidad con funda ortopédica.
6. Si lo desea, una vez que se haya alcanzado la presión deseada, cierre la válvula de la conexión más baja girando la palanca de la válvula perpendicular (o 90°) a la manguera.

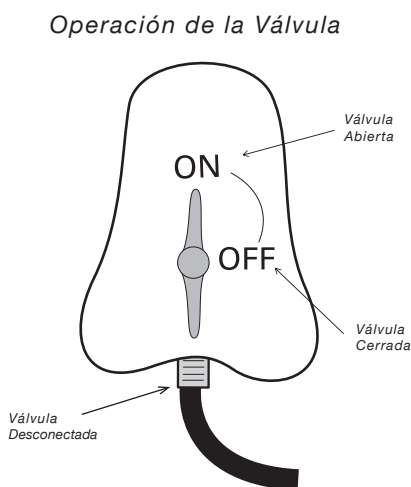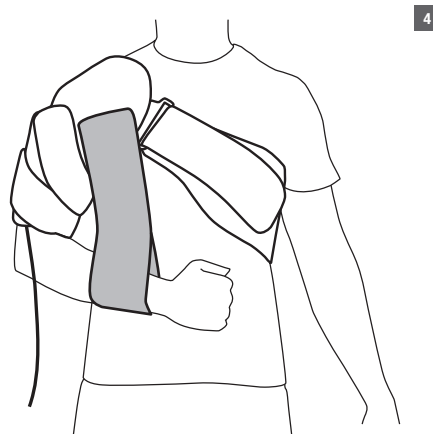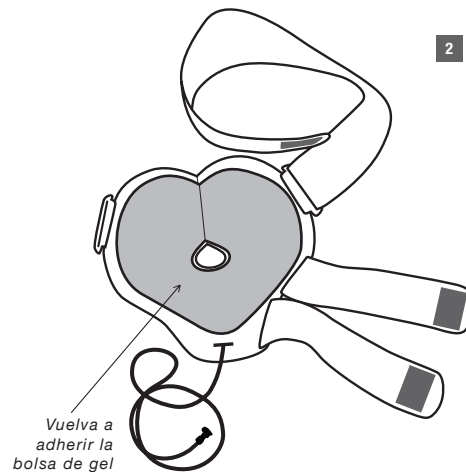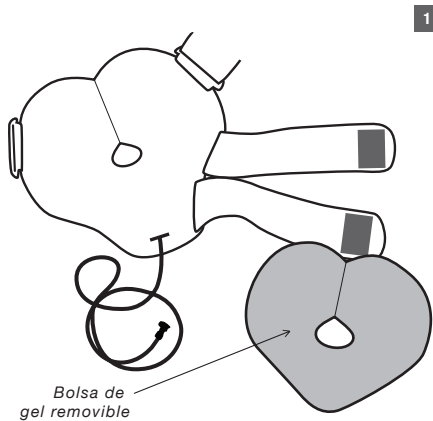

BOMBILLA MANO OPCIONAL

El producto se suministra con una bombilla de mano opcional que puede ser usado para inflar / desinflar la envoltura en el ausencia de la unidad de Triple Play VT. Si lo desea, usted puede utilizar tijeras para cortar el tubo justo debajo de la inserción en la envoltura. A continuación, coloque el conector de púas en la bombilla en el tubo conectado a la envoltura.

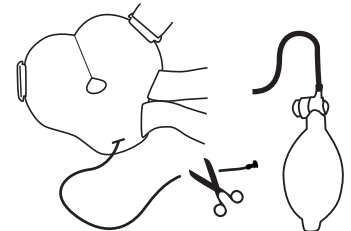

Para obtener más información sobre este producto llame al: **800.994.0464**

www.CompressionSolutions.us